



bofeel
total care for silver age

접이식 이동변기

모델명 : SAMB

취급설명서

보증서 첨부

※ 특 징

1. 접이식타입 : 좁은 공간에도 부담없이 보관
2. 높이조절 기능 : 신장에 따라 4단층(약 10cm)으로 조절가능
3. 팔걸이 부착 : 손이 바닥으로 축 쳐지지 않도록 되어 있어 사용시 바른자세 유지가능
4. 고무캡 사용 : 미끄럼방지 기능
5. 가벼운 재질 사용 : 노약자들이 들고 옮기기 쉬움 (중량 : 약 4kg)

- 안전을 위해 사용전에 반드시 이 취급설명서를 읽어 주십시오.
- 다 읽으신 후는 언제라도 필요시에 꺼내 볼 수 있도록 가까운 장소에 보관해 주십시오.



※고령친화우수제품 코드 : T03030025001

생산물배상책임보험 가입제품

목 차

안전상의 주의 및 사용방법 1

각부의 명칭 및 구성품 2

보증서 3

주식회사 보필

안전상의 주의

반드시 지켜 주십시오.



- 수발자가 있을 때 사용해 주십시오.
- 넘어져 부상을 입는 것을 방지하기 위해 다음 사항에 주의해 주십시오.
 - 고정핀이 고정구멍에 정확히 들어가있는 것을 확인한 다음 사용해 주십시오.
 - 4개의 다리를 모두 같은 높이로 맞추어서 사용해 주십시오.
 - 변기시트 받침대에 너무 기대어 사용하지 말아 주십시오.
 - 앉을 때나 일어설 때에 강한 힘으로 변기시트 받침대와 팔걸이를 붙잡지 말아 주십시오.
 - 평평한 바닥에 놓고 사용해 주십시오. 설치 장소가 미끄러지기 쉬운 바닥재의 경우는 미끄럼방지시트 등으로 미끄러지지 않도록 해주십시오.
 - 이동변기를 발판으로 사용하지 말아 주십시오.




- 화기, 열원 근처에 놓아두지 말아 주십시오. 변형, 변질 될 우려가 있습니다.
- 개조하지 말아 주십시오. 파손 또는 부상의 우려가 있습니다.
- 어린이 놀이 기구로 사용하지 말아 주십시오. 사고의 우려가 있습니다.
- 본래의 목적 이외의 사용은 피해주십시오. 파손 또는 부상의 우려가 있습니다.

사용 방법

높이 조절

4개의 다리에 각각 높이 조절용 고정핀과 4개의 높이 조절용 구멍이 있어 좌면 높이를 4단계로 조절 할 수 있습니다.

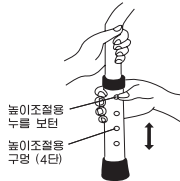

1. 고정핀을 누르면서 다리를 상하로 움직여 희망하는 높이로 맞춥니다. 고정핀과 고정 구멍이 “딱”하고 소리가 나면서 확실하게 서로 고정된 것을 확인합니다.
2. 다른 다리에 대해서도 1과 같은 작업을 행하여 4개의 다리를 같은 높이로 맞춥니다.
3. 좌면에 앉아 보고 높이가 맞는지 확인합니다.

버킷(변기통)의 넣고 빼기

1. 변기통을 넣습니다. 변기시트커버와 변기시트를 올립니다. 손잡이를 잡고 변기통을 넣습니다.
2. 변기시트커버를 내립니다. 변기시트 커버를 잡고 변기시트를 내리는 것 뿐입니다. 사용시 변기시트커버를 등받이로 사용할 수 있습니다. 양쪽의 팔걸이로 몸을 지탱하면서 바른 위치로 앉아 주십시오.
3. 변기통을 꺼냅니다. 사용 후는 변기시트를 올리고, 변기통 뚜껑을 덮고, 변기통을 꺼냅니다. 그대로 화장실로 옮겨 처리합니다. 할 수 있는 한 그때 그때 깨끗이 씻어 주십시오. 탈취제 등을 함께 사용하실 것을 권장합니다.

사용 방법

- 사용후는 부드러운 천 등으로 물기를 닦아내고, 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.
- 씻을 때는 중성세제를 사용해 주십시오. 신나, 벤젠, 수세미 등을 사용하지 말아 주십시오.

각부의 명칭

접이식 이동변기 SAMB

접이식 이동변기 SAMB는 자력으로 화장실까지 가실 수 없는 분이 방, 거실 등에서 사용하기 위한 기구입니다.


■ 사양




구성부 재료	부품명	재질
	손잡이	고탄력 EVA
	회전엘보	강화 P.P
	변기시트	P.P (폴리프로피렌)
	버킷	
	고무발	합성고무
	파이프	AL(알루미늄)
사이즈	의자상태 560×490×790mm (4단 높이조절) 접은상태 560×200×790mm	
중량	4.8kg(버킷 포함)	
변기통용량	8L	
좌면까지의 높이	360~430mm (4단 높이조절)	

※제품 개량을 위해서 사양 및 외관은 예고없이 변경하는 경우가 있습니다.


■ 사이즈 및 제품구성 (단위mm)

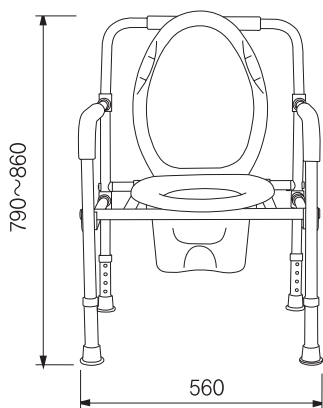

정면

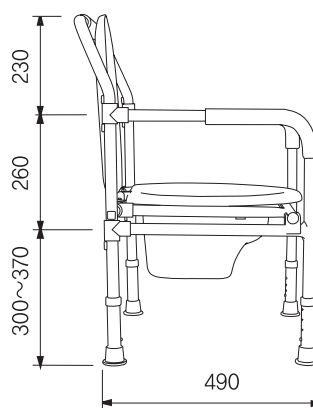

측면

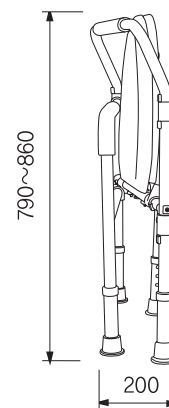

접었을 때

※치수 허용오차는 ±1cm 입니다.

보증서

이 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사를 거친 제품입니다. 고객께서 취급설명서에 따라 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우에는 본 보증서 기재 내용에 따라 무료로 수리를 해 드립니다.
유효기간은 구입일로 부터 1년간 입니다.

1. 수리는 구입하신 판매점에 상담해 주십시오. 수리시 본 보증서를 제시 또는 첨부해 주십시오.
2. 구입하신 판매점의 이전 등으로 수리 의뢰를 하실 수 없는 경우는 본사 매장에 상담해 주십시오.
3. 본 보증서는 재발행하지 않으므로 잘 보관해 주십시오.
4. 보증기간중이라 해도 하기의 경우는 유료로 수리 해 드립니다.
 - 1) 보증서의 제시가 없는 경우
 - 2) 본 보증서의 구입일, 판매점의 기입이 없는 경우
 - 3) 업무용 또는 일반 가정용 이외로 사용한 경우의 고장 또는 손상
 - 4) 사용상의 잘못 혹은 개조, 수리, 조정에 의한 고장 또는 손상
 - 5) 구입후의 운반, 이용, 낙하, 기타 부적절한 취급에 의한 고장 또는 손상
 - 6) 화재, 염해, 가스해, 풍수해, 낙뢰, 이상전압, 기타 천재지변에 의한 고장 또는 손상
 - 7) 쿠션 또는 미끄럼방지 등 소모품의 손상 및 더러움
5. 본 보증서는 한국내에서만 유효합니다.
6. 보증기간 경과 후의 수리에 대해서는 판매점에 상담해 주십시오.

★ 구 입 일	년	월	일
보증기간	구입일로 부터 1년		
고 객	주소		
	성명	연락처	
★ 판 매 점	주소		
	점명	연락처	

★란에 기입이 없는 경우는 무효이므로 반드시 기입 유무를 확인해 주십시오.

★수리, 취급 등의 상담은 먼저 구입하신 판매점에 문의해 주십시오.

(주)보필

대표전화 : 1544-8065

www.bofeel.co.kr

경기도 안성시 미양면 계곡리 270-1번지